



C 公司简介

COMPANY PROFILE ▶

广东易齐美医疗科技有限公司是由定远集团、台大研发团队联合创立的高新技术企业，通过 SGS 公司 ISO 13485 质量体系认证。是一家专注于隐形矫正领域，集研发、生产、销售与服务为一体的现代化创新型企业，在口腔正畸行业深耕多年，始终致力于为全球患者提供高品质、个性化的隐形矫正解决方案。

公司自主研发的隐形矫正系统，依托先进的数字化口扫技术，能够快速、精准地获取患者口腔数据，通过专业正畸软件进行三维建模和模拟矫治过程，为每位患者量身定制专属的矫正方案，实现牙齿移动的精确控制，确保矫正效果，为更多人带来自信灿烂的笑容，开启健康美好的生活。

易齐美秉承“真善美好、开拓创新”的工匠精神，在材料研发、技术革新、生产自动化等方面是中国口腔医疗行业数字化的践行者和推动者。

易齐美产品六大特点

美丽笑容 · 从齿改变



可预测性

通过对牙齿力矩系统的特性研究，结合3D建模矫治模拟技术，直观矫治前中后效果

自行摘戴

可自行随时摘戴，不影响饮食和刷牙，确保口腔洁净卫生，降低口腔疾病的发生率

科学精确

自主研发3D设计软件，能精确控制每颗牙齿每步移动0.2mm，实现矫治效果

隐形透明

独特专利技术，佩戴时不易察觉，不影响正常工作和生活

轻薄舒适

可提供两种厚度材料，佩戴时不会有很强的异物感和牵拉感，对口腔不易造成创伤

私人定制

每一副矫治器都是量“齿”定制，每两周更换一副，更符合个人的矫治进程

易齐美系列隐形矫治器

系列名称	微矫正版	标准版	高阶版	汇艺齐
系列产品				
系列描述	只动牙列4-4, 不动后牙	易齐美明星产品, 能解决广泛的牙齿矫正问题; 不能选择拔除前磨牙, 只能拔除切牙, 不涉及骨性反颌	可以选择拔除前磨牙、不涉及骨性反颌	采用双膜矫治技术与优质膜片材料, 提供更快的矫治速度
版本特点	移动4-4牙位病例, 不限副数	不拔牙病例, 磨牙远移, 不限副数	拔牙病例, 不限副数	拔牙病例, 不限副数
矫治器	单膜	单膜	单膜	A膜: 软膜 B膜: 硬膜
服务周期	1年	3年	5年	5年
适用病例	移动4-4牙位的简单病例 (关闭间隙, 个别牙反合调整等)	恒牙列病例	恒牙列病例	大部分病例, 特别适合追求体验和快速矫正效果的用户
禁忌症	拔前磨牙病例 深覆颌/深覆盖 替牙期病例 骨性病例 严重牙周炎病例 咬合重建病例	拔前磨牙病例 替牙期病例 骨性病例 严重牙周炎病例 咬合重建病例	替牙期病例 骨性病例 严重牙周炎病例 咬合重建病例	替牙期病例 骨性病例 严重牙周炎病例 咬合重建病例
牵引系统	精密切割	精密切割 免费升级齐美扣	精密切割 免费升级齐美扣	牵引系统-齐美扣
单步佩戴周期	10-14天	10-14天	10-14天	12天(5+7组合佩戴)
生产方式	分次交付	分次交付	分次交付	分次交付
数量限制	不限	不限	不限	不限
重启	服务周期内免费	服务周期内免费	服务周期内免费	服务周期内免费

易齐美产品适应症

适用于各类正畸病例



龅牙

牙齿不易清洁
易患龋齿



开颌

嘴巴合不上
饮食受阻




地包天

面部凹陷下巴突出
导致自卑



牙列拥挤

牙齿容易堆积食物
易发生牙周病

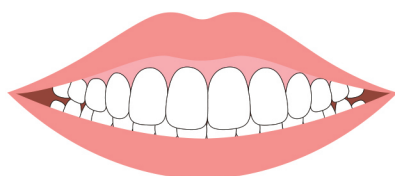

深覆颌

侧面突出
影响面部美观



牙列稀疏

说话漏风咀嚼不充分
增加肠胃负担



偏颌

两侧严重不对称
颌关系紊乱，影响容貌



虎牙

影响咀嚼
导致面部不协调



露龈笑

上颌突出
影响美观

案例探索拔牙病例2例

案例1：下颌后缩, 牙弓狭窄、不对称, 下颌中线偏移, 中线移位, 牙列拥挤, 扭转

矫正前



矫正后



案例2：深覆盖, 上颌中线偏移, 牙列拥挤

矫正前



矫正后



案例探索标准版2例

案例1：深覆盖，牙弓狭窄，牙弓不对称，下颌中线偏移，牙列拥挤

矫正前



矫正后



案例2：深覆盖，牙弓狭窄，牙弓不对称，上颌中线偏移，中线移位，牙列拥挤，扭转

矫正前



矫正后



易齐美-隐形矫正合作流程

01. 医师需准备的资料 (照片具体要求,请参考易齐美隐形矫正照片要求或拍照教程)


① 患者合格的外观像



② 患者口内照片




③ X线片(曲面断层片和头颅侧位片)

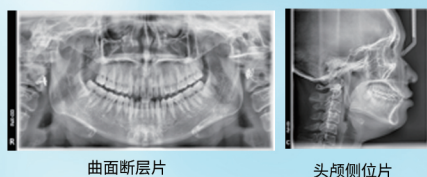

扫码注册易齐美
病例系统账号



④ 硅橡胶印模或口扫数据 (可只选一)

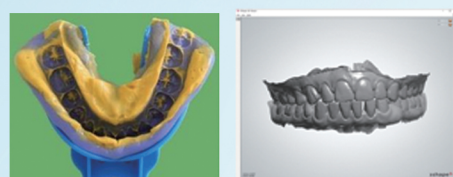

02. 将准备好的患者资料上传至病例系统(打开网址: <http://59.36.188.218:8200>)

① 添加新病人

患者姓名: 张三
患者性别: ☒ 男 ☐ 女
出生日期: 2005-09-17

② 上传照片



③ 矫治计划

矫治计划
排齐上颌前牙, 关闭下前牙, 间、隙、拥挤、黑三角, 纠正21°36°转矩。

④ 上传模型

模型类型: ☒ 模型 ☐ 咬模
需治疗的牙: ☐ 上颌 ☐ 下颌 ☐ 全口
上颌模型 (°): 选择上颌模型
下颌模型 (°): 选择下颌模型
对咬模型 (°): 选择咬合记录

⑤ 订单确认

预览 编辑 提交订单

03. 【批准】 / 【驳回】 方案

登录账号

待医生批准的病例 (1)
治疗方案



3D方案

方案需修改

同意方案

驳回

批准



填写修改方案意见

04. 后续牙套生产下单

登录账号

生产中的病例 (1)

医师 矫治计划

申请加工矫治器

申请加工矫治器

请上传 3D模型
上颌模型 (°): 4 6 8 10 12
下颌模型 (°): 4 6 8 10 12
对咬模型 (°): 4 6 8 10 12

易齐美会员小程序全新上线

简化流程

操作简单

线上支付


积分兑换

全新上线



◆ 易齐美小程序全新上线 ◆

内容包括易齐美隐形系列产品介绍预览及线上支付，会员充值，产品会员折扣，会员积分兑换，订单跟踪、售后一站式服务。

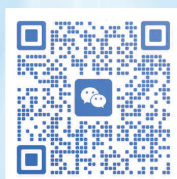

详情请联系工作人员